



🔒 ESTADO

✓ Hecho

📄 PRIORIDAD

Alto

🕒 TIEMPO ESTIMADO

1h

TIPO DE TRABAJO

Preventivo

☰ DESCRIPCIÓN

Se realiza mantenimiento de la balanza de este equipo, según orden de compra.

Como es un sistema de Dilución, se realizará inspección básica a los cartuchos de las bombas peristálticas.

👤 ASIGNADOS

 Manuel Meneses

📁 CATEGORÍAS

Inspection

Mantenimiento Preventivo

📍 UBICACIÓN

**Instituto Conmemorativo
Gorgas de E.S.**

Principal: INNOVATECIS, S.A.

🏢 ACTIVO

**53756 - Equipo de Dilución
gravimétrica Dilucult**

 PROCEDIMIENTO**Balanza-Mantenimiento Preventivo****7 / 7**

Campos completados

 Descripción

Revisión general, limpieza y pruebas de desempeño

Revisión general:

- ☒ Inspección visual general
- ☐ Estado de corta aires
- ☒ Estado de pantalla(incluir protector o cubierta)
- ☒ Operación de teclado o pantalla táctil.
- ☒ Calentamiento de celda y funcionamiento preliminar
- ☐ Prueba de excentricidad 1
- ☒ Prueba de Repetibilidad 1
- ☒ Observaciones adicionales (instalación eléctrica, mesa de trabajo, etc.)
- ☐ Nivelación y patas ajustables

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 10:44 AM



Limpieza General:


- ☒ Limpieza Externa
- ☒ Limpieza Interna
- ☐ Prueba de excentricidad 2
- ☒ Prueba de Repetibilidad 2

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 10:44 AM

Estado actual del sistema(observaciones):

- ✓ Aprobado
- Alerta
- Falla

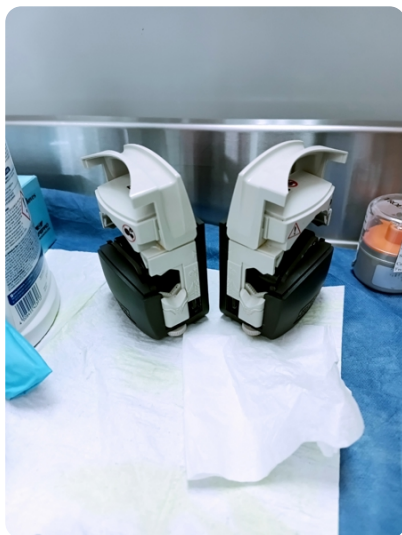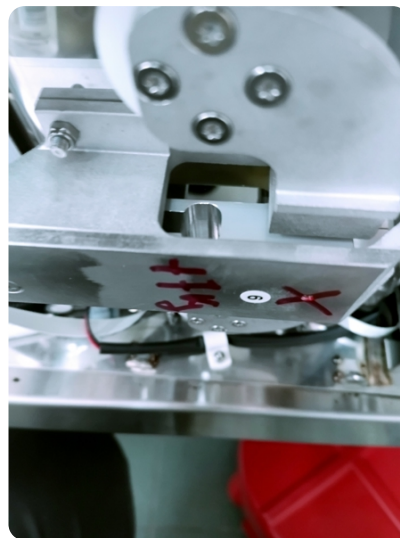

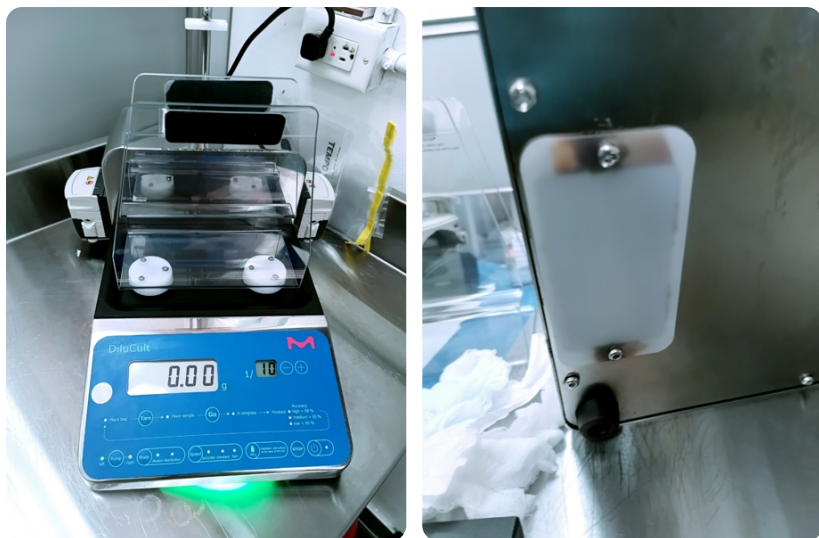**Notas:**

Se realiza el procedimiento estándar de revisión y mantenimiento.

El error de carga excéntrica se puede despreciar debido a que este equipo maneja bolsas con líquido de modo que la carga normalmente está distribuida de forma uniforme; sin embargo se hace prueba en ambos puntos de apoyo del plato que son fijados en una sola celda de carga tipo "off Center" o de carga por flexión.

Se realizó limpieza bajo las cubiertas de protección de derrame de líquidos y se inspeccionan los cabezales de las bombas peristálticas, los cuales se observan en estado normal.

No sé probó comunicación con sistema de Captura de datos o control.

La balanza se ajusto y está funcionando correctamente.

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 10:44 AM

Realiza la inspección :

M. MENESES

Firmado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 10:51 AM

Fecha del servicio:

06/18/2025

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 10:51 AM

Por parte del cliente :

JP

Firmado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 11:48 AM

Etiqueta de Mantenimiento :

☒ Colocada

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 11:48 AM

📘 INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Created by: Manuel Meneses on 06/18/2025, 9:49 AM

Last updated on 06/18/2025, 11:48 AM

Completado el 06/18/2025, 11:48 AM