



🔒 ESTADO

✓ Hecho

📄 PRIORIDAD

Alto

🕒 TIEMPO ESTIMADO

1h

TIPO DE TRABAJO

Preventivo

☰ DESCRIPCIÓN

Revisión general, pruebas de funcionamiento (Pantalla, teclado (pantalla táctil), limpieza, pruebas básicas de desempeño: exactitud, linealidad, excentricidad. Comprobación de retorno a cero. Reporte estándar.

👤 ASIGNADOS

 Manuel Meneses

📁 CATEGORÍAS

Inspection

Mantenimiento Preventivo

📍 UBICACIÓN

**Instituto Conmemorativo
Gorgas de E.S.**

Principal: INNOVATECIS, S.A.

🏢 ACTIVO

**48814 - Balanza Analítica
OHAUS -ICGES**

 PROCEDIMIENTO**Balanza-Mantenimiento Preventivo****7 / 7**

Campos completados

 Descripción

Revisión general, limpieza y pruebas de desempeño

Revisión general:

- ☒ Inspección visual general
- ☒ Estado de corta aires
- ☒ Estado de pantalla(incluir protector o cubierta)
- ☒ Operación de teclado o pantalla táctil.
- ☒ Calentamiento de celda y funcionamiento preliminar
- ☒ Prueba de excentricidad 1
- ☒ Prueba de Repetibilidad 1
- ☒ Observaciones adicionales (instalación eléctrica, mesa de trabajo, etc.)
- ☒ Nivelación y patas ajustables

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 9:42 AM



Limpieza General:

- ☒ Limpieza Externa
- ☒ Limpieza Interna
- ☒ Prueba de excentricidad 2
- ☒ Prueba de Repetibilidad 2

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 9:42 AM

Estado actual del sistema(observaciones):

- ✓ Aprobado
- Alerta
- Falla

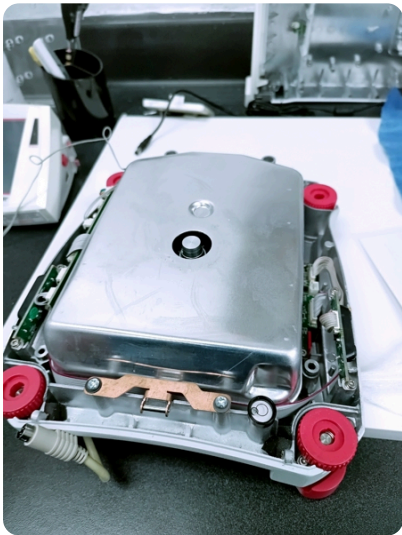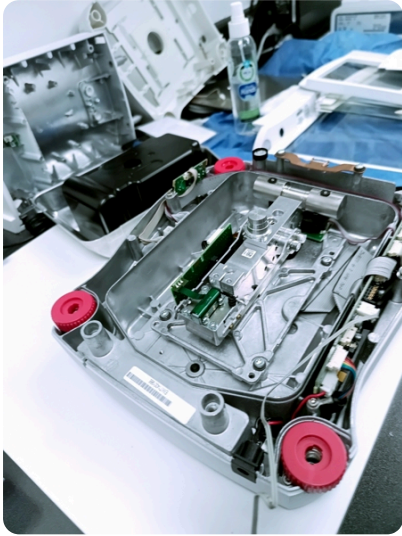

Notas:
Observaciones:

La balanza está nivelada; pero las patas ajustables están algunas al límite de extensión. Al recoger todas, se encuentra una de ellas atascada por algún derrame que dejó residuos y provocó corrosión o similar en el tornillo.

El corta aires está manchado. No es tan notable y no afecta el funcionamiento

El plato de la balanza está suelto de la base. Se colocó pegamento; pero si en algún uso se fractura, se deberá colocar un pegamento más fuerte.

Los sensores laterales están inhabilitados por etiquetas y similares.è

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 9:42 AM

Realiza la inspección :



Firmado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 10:00 AM

Fecha del servicio:

06/17/2025

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 9:42 AM

Por parte del cliente :



Firmado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 1:25 PM

Etiqueta de Mantenimiento :

☒ Colocada

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 1:19 PM

❶ INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Created by: Manuel Meneses on 06/17/2025, 8:17 AM

Last updated on 06/17/2025, 1:26 PM

Completado el 06/17/2025, 1:26 PM