



ESTADO

✓ Hecho

PRIORIDAD

Alto

TIEMPO ESTIMADO

1h

TIPO DE TRABAJO

Preventivo

DESCRIPCIÓN

Revisión general, pruebas de funcionamiento (Pantalla, teclado (pantalla táctil), limpieza, pruebas básicas de desempeño: exactitud, linealidad, excentricidad. Comprobación de retorno a cero. Reporte estándar.

ASIGNADOS

 Manuel Meneses

CATEGORÍAS

Inspection

Mantenimiento Preventivo

UBICACIÓN

**Instituto Conmemorativo
Gorgas de E.S.**

Principal: INNOVATECIS, S.A.

ACTIVO

**46011 - Balanza Analítica
Mettler Toledo MS304 -ICGES**

 PROCEDIMIENTO**Balanza-Mantenimiento Preventivo****7 / 7**

Campos completados

 Descripción

Revisión general, limpieza y pruebas de desempeño

Revisión general:

- ☒ Inspección visual general
- ☒ Estado de corta aires
- ☒ Estado de pantalla(incluir protector o cubierta)
- ☒ Operación de teclado o pantalla táctil.
- ☒ Calentamiento de celda y funcionamiento preliminar
- ☒ Prueba de excentricidad 1
- ☒ Prueba de Repetibilidad 1
- ☒ Observaciones adicionales (instalación eléctrica, mesa de trabajo, etc.)
- ☒ Nivelación y patas ajustables

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 10:55 AM

Limpieza General:

- ☒ Limpieza Externa
- ☒ Limpieza Interna
- ☒ Prueba de excentricidad 2
- ☒ Prueba de Repetibilidad 2



Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 10:55 AM

Estado actual del sistema(observaciones):

✓ Aprobado

Alerta

Falla

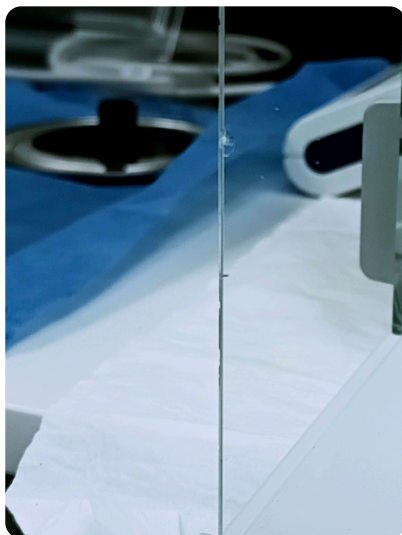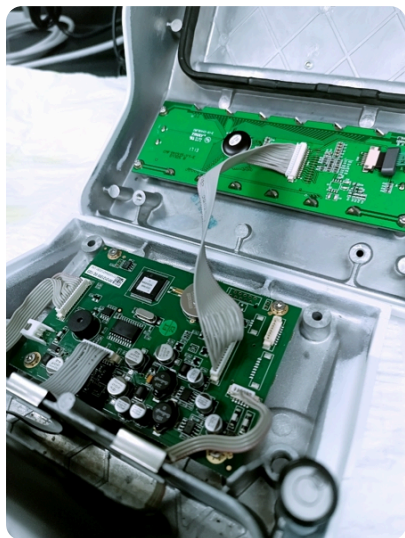

Notas:

La balanza se encontró en funcionamiento normal. Las pruebas realizadas están dando valores dentro de lo esperado. El corta aires frontal tiene dos puntos astillados en el borde izquierdo, sin embargo no se ve en peligro la integridad del vidrio completo.

Se realizó prueba de mantenimiento de hora y fecha

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 10:55 AM

Realiza la inspección :

M. MENESSES

Firmado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 11:01 AM

Fecha del servicio:

06/17/2025

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 11:02 AM

Por parte del cliente :

T.G.

Firmado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 1:25 PM

Etiqueta de Mantenimiento :

☒ Colocada

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 1:19 PM

📄 INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Created by: Manuel Meneses on 06/17/2025, 10:09 AM

Last updated on 06/17/2025, 1:26 PM

Completado el 06/17/2025, 1:26 PM