



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA**Certificado No. (Certificate #):** 60189

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-08-19

Quito, Ecuador

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-08-19

(+593) 02 6040 607

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): -

innovatec@innovatec.com.ec

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-08-19**Cliente (Client):**

Suez International

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Llano Bonito, Juan Díaz

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Nevera	Int. de Medición: (Measurement Range)	(2 A 24) °C	Ubicación (Location):	Laboratorio
Marca (Brand):	HAIER Biomedical				
Modelo (Model):	HYC-290	División de escala: (Resolution)	0.5 °C	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ / On Site
Serie (Serial #):	BE06MYE1T00QE2R0005				
Código (Code):	NEPALA-05				

Datos de Calibración (Calibration Info)**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)****Procedimiento (Procedure):** INN-PC-29**Temperatura (Temp):** (21 °C ± 21.2 °C)**Humedad (Humidity):** (73 %HR ± 73 %HR)**Trazabilidad (Traceability Info)**

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Termohigrómetro	Elitech	58688 a 58699	2025-07-07	1 año
Termohigrómetro	Elitech	53718 al 53727	2025-02-04	1 año

Resultados (Results)

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)	Estabilidad (Stability)	Uniformidad (Uniformity)
°C	°C	°C			Axial / Radial
5.7	5.0	-0.7	± 2.9 °C	± 2.1 °C	± 3.9 °C / ± 2.3 °C
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:

Temperatura de control determinada por termómetro de líquido en vidrio.

Comments

Calibrado por:

Ing. Rubén Ortega

Calibrated by:

Aprobado por:

Approved by:

Certificado No.: 60189

Fecha de Calibración: 2025-08-19

Equipo (Instrument): Nevera

Marca (Brand): HAIER Biomedical

Tabla 1.0: Lecturas de los sensores durante desplazamiento en la zona de trabajo @ 5 °C										
Tiempo (hh:mm:ss)	Lectura del Patrón @ 5 °C									
	PC	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
11:12:57	5.0	7.1	5.7	6.1	6.3	6.5	3.5	4.4	5.9	4.2
11:13:57	5.0	7.1	5.9	6.0	6.4	6.6	3.7	4.6	6.0	4.5
11:14:57	5.0	7.2	6.1	5.9	6.6	6.7	3.8	4.9	6.0	4.8
11:15:57	5.0	7.3	6.3	5.8	6.7	6.8	4.1	5.1	6.1	5.1
11:16:57	5.0	7.4	6.4	5.7	6.9	6.9	4.3	5.2	6.2	5.4
11:17:57	5.0	7.5	6.6	5.6	7.1	7.0	4.4	5.2	6.3	5.7
11:18:57	5.0	7.6	6.7	5.6	7.2	7.1	4.5	5.1	6.4	5.8
11:19:57	5.0	7.7	6.7	5.6	7.2	7.2	4.5	5.0	6.4	5.7
11:20:57	5.0	7.7	6.7	5.7	7.2	7.2	4.5	4.8	6.5	5.6
11:21:57	5.0	7.7	6.6	5.8	7.1	7.2	4.4	4.6	6.5	5.4
11:22:57	5.0	7.6	6.5	5.9	7.0	7.2	4.3	4.4	6.5	5.2
11:23:57	5.0	7.6	6.4	6.0	7.0	7.1	4.1	4.2	6.4	5.0
11:24:57	5.0	7.5	6.3	6.1	6.8	7.0	4.0	4.0	6.4	4.7
11:25:57	5.0	7.5	6.1	6.3	6.7	7.0	3.8	3.8	6.3	4.5
11:26:57	5.0	7.5	6.0	6.4	6.6	6.9	3.7	3.6	6.3	4.4
11:27:57	5.0	7.4	5.9	6.4	6.5	6.8	3.5	3.5	6.2	4.2
11:28:57	5.0	7.3	5.8	6.4	6.4	6.7	3.5	3.3	6.1	4.1
11:29:57	5.0	7.2	5.6	6.4	6.3	6.7	3.4	3.3	6.1	3.9
11:30:57	5.0	7.1	5.5	6.4	6.2	6.6	3.2	3.3	6.0	3.8
11:31:57	5.0	7.0	5.4	6.3	6.1	6.5	3.2	3.5	6.0	3.7
11:32:57	5.0	7.0	5.4	6.2	6.0	6.4	3.1	3.7	5.9	3.7
11:33:57	5.0	7.0	5.4	6.1	6.1	6.4	3.2	3.9	5.8	3.8
11:34:57	5.0	7.0	5.6	6.0	6.1	6.4	3.3	4.2	5.8	4.0
11:35:57	5.0	7.0	5.7	5.9	6.3	6.5	3.5	4.4	5.9	4.3
Promedio	5.0	7.3	6.1	6.0	6.6	6.8	3.8	4.3	6.2	4.6
Desviación	0.0	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.7	0.2	0.7
Max	5.0	7.7	6.7	6.4	7.2	7.2	4.5	5.2	6.5	5.8
Min	5.0	7.0	5.4	5.6	6.0	6.4	3.1	3.3	5.8	3.7
ΔT Est.	2.1									
ΔT Radial	2.3									
ΔT Axial	3.9									


Certificado No.: 60189

Fecha de Calibración: 2025-08-19

Equipo (Instrument): Nevera

Marca (Brand): HAIER Biomedical

Ilustración 1.0: Ubicación de los sensores en la zona de trabajo

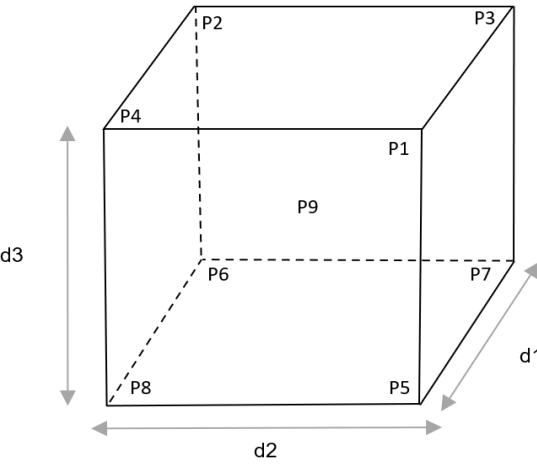

Fin de Certificado (End of Certificate)